


# iPad アプリ「さくっと One」設定

事前に iPad の初期設定、および Apple ID の紐づけ及びアプリのインストールを終えておくように医院に指示をします。Apple ID は医院管理になります。アプリは App Store で「オプテック」と検索すると見つかりますのでライセンスが付与されているアプリをインストールします。【アプリ：さくっと one】

院内の親機と同一ネットワークの Wi-Fi に繋がります。※オプテックで納めた無線の場合

SSID : optech-ap      optech2019  
SSID : opt-ap        optech2019  
SSID : optech-ap-g    optone20070401

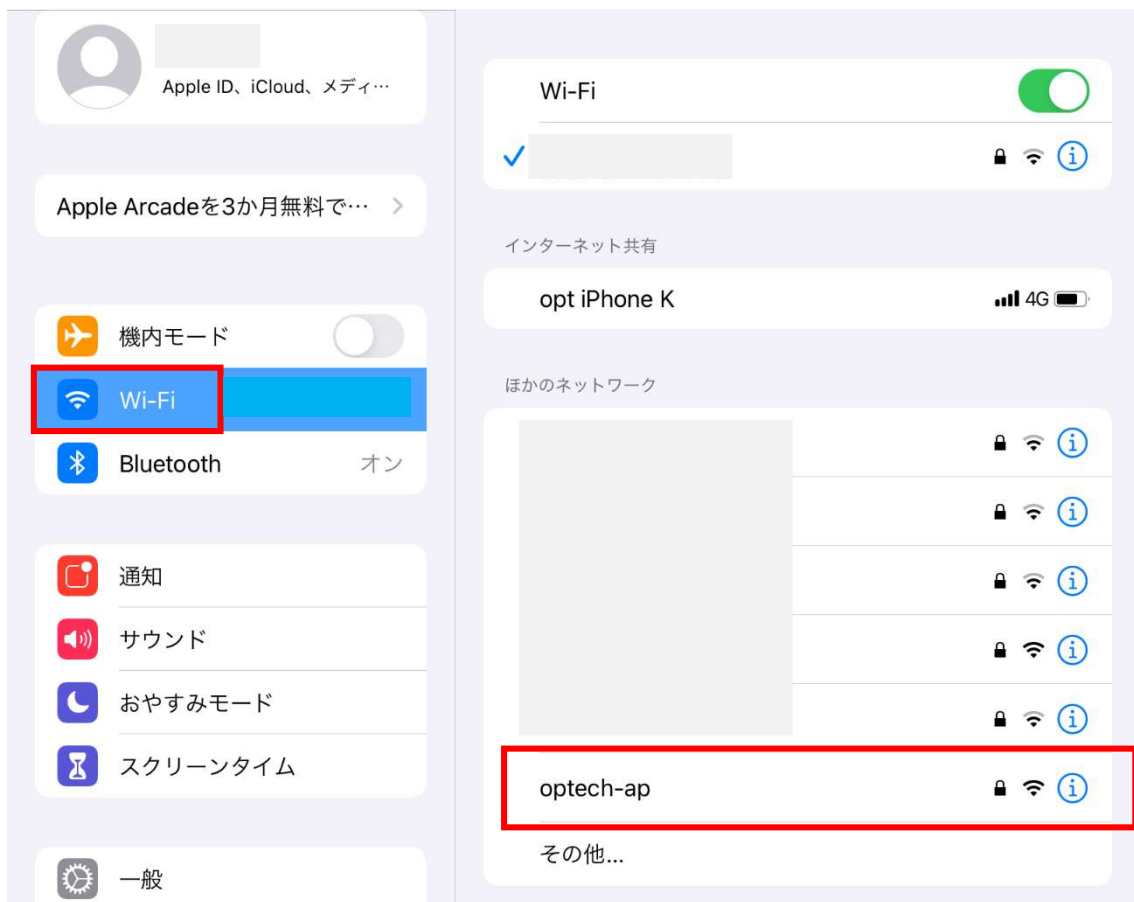

※電話でサポートする為、セキュリティを犠牲にします。

セキュリティを上げたい場合は医院様でセットアップのご協力をお願いします。

① 「設定」画面の左からアプリの設定画面に移り

「ローカルネットワーク」をオンにして「アドレス」に親機の IP アドレスを入れます。

親機の IP アドレスの確認方法は③を参照して下さい。


※さくっと One はデフォルトで 192.168.12.70 となっていますが一度入れなおしてください。



- ② 親機の IP 確認はまず、タスクバー右にある「2」の小アイコン（拡張サーバー）をクリックします。



- ③ IP が表示されますので確認します。※親機 PC で行ってください。

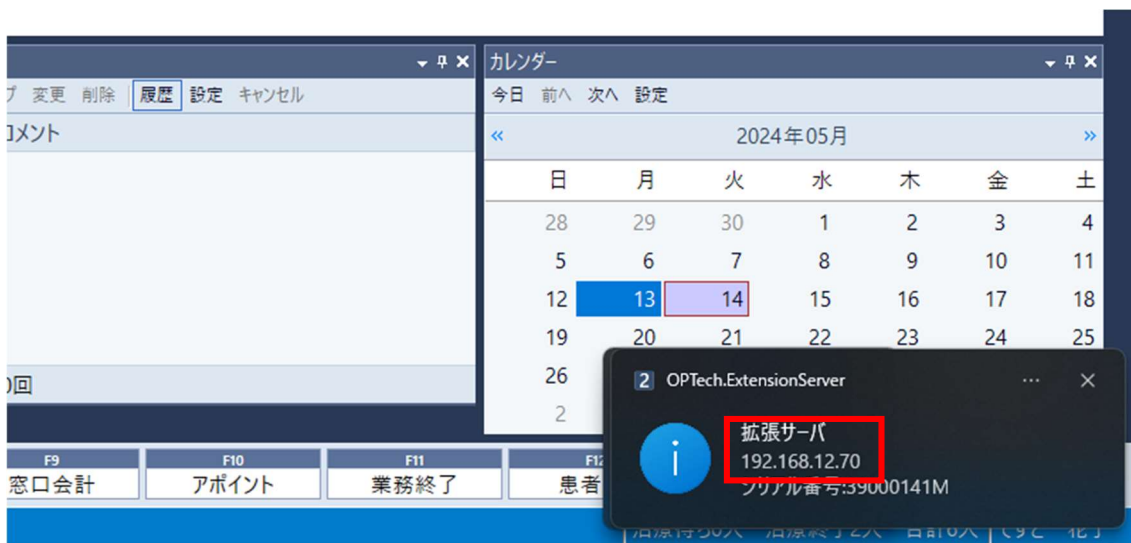

- ④ アプリを起動したら、ローカルエリア接続の許可が出ますので必ず「許可」を押してください。

